

Trocarte com Ponta Dilatadora

Os trocates Endopath Xcel proporcionam acesso ao melhor que a Ethicon tem a oferecer

Selo Universal Durável

- Não há necessidade de redutor universal
- Mantém a insuflação
- Acomoda uma ampla variedade de tamanhos de instrumentos (4.7mm a 12.9mm)

Alavanca de Liberação

- Destrava o corpo para facilitar a retirada de espécimes grandes



Entrada em Funil

- Permite a fácil troca de instrumento com apenas uma mão

Válvula Reguladora Rebaixada


- Minimiza a abertura/fechamento inadvertido(a) da válvula durante a cirurgia

Corpo de Baixo Perfil

- Permite maior alcance do instrumento

Desenho de Rosca com Estabilidade Integrada

- Maximiza a retenção da parede abdominal para deslizamento mínimo do trocarter

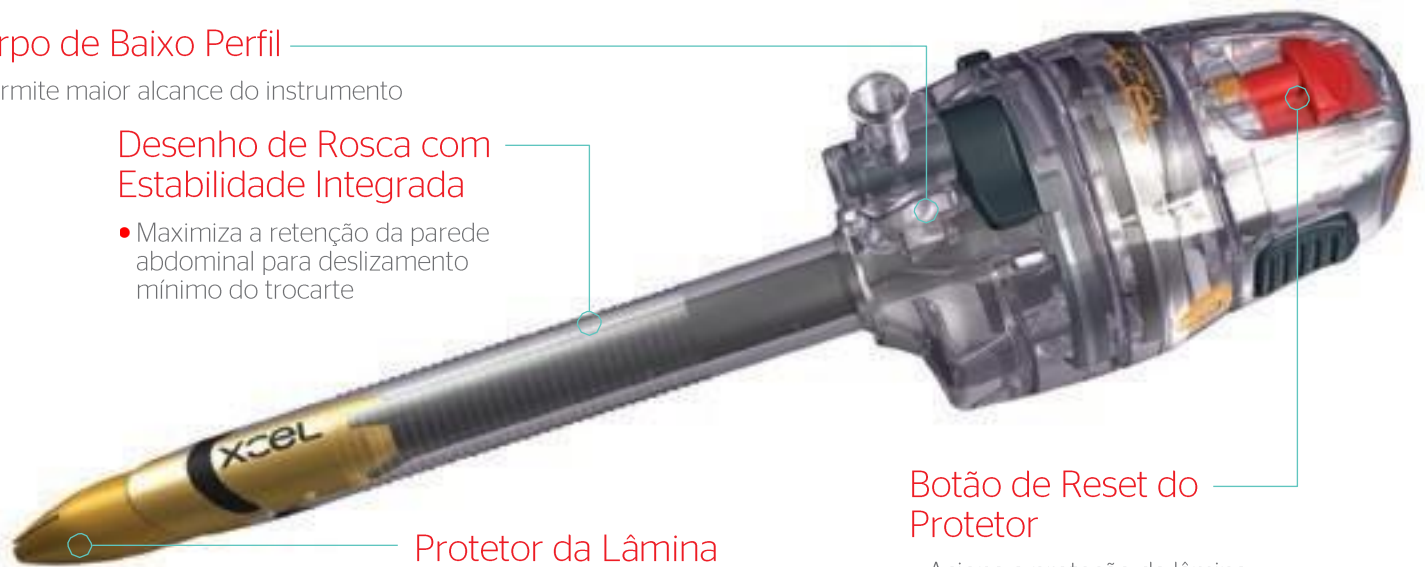

Protetor da Lâmina

- Protege as estruturas internas dos danos durante a inserção

Botão de Reset do Protetor

- Aciona a proteção da lâmina para inserção

Informações para Pedidos

Trocartes ENDOPATH XCEL® com Ponta Dilatadora

Código Descrição		Comprimento
D5ST	Trocarte 5mm de diâmetro	75mm
D5LT	Trocarte 5mm de diâmetro	100mm
D11LT	Trocarte 11mm de diâmetro	100mm
D12LT	Trocarte 12mm de diâmetro	100mm
D12XT	Trocarte 12mm de diâmetro	150mm

Unidades por caixa: 6

Cânula Universal ENDOPATH® XCEL®

Código Descrição		Comprimento
CB5LT	Cânula 5mm de diâmetro	100mm
CB11LT	Cânula 11mm de diâmetro	100mm
CB12LT	Cânula 12mm de diâmetro	100mm

Unidades por caixa: 6

©Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.2017.

Johnson & Johnson Medical Brasil, uma divisão de Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.

Av. Presidente Juscelino Kubitscheck, 2041 Complexo JK - Bloco B 8 andar, São Paulo/SP, CEP 04543-011

Responsável técnico: Nancy Mesas do Rio- CRF_SP nº 10.965.

TROCARTES CIRÚRGICOS ENDOPATH XCEL Registro ANVISA 80145900744

Conteúdo destinado a profissionais de saúde.

Elaborado em: 10/2017

082891-171024